

FITTOP

Massaažipüstol

Super Hit™

Intelligentne ja turvaline
massaažipüstol



SHENZHEN FITTOP HEALTH TECH.CO.,LTD.

Maaletooja: OÜ Inpello

Aadress: Juhkentali 15, Tlinn 10132, Eesti www.medpoint.ee

SISUKORD

Oluline informatsioon	1
Toote spetsifikatsioonid	4
Laadimine	6
Kasutamine	6
Hooldamine, puhastamine, hoiustamine, transport	8
Uuenduslik tehnoloogia	9
Massaažiotsikud	14

Oluline informatsioon

⚠ Tähelepanu!

Rikete, elektrilöögi, vigastuste, tulekahju, surma ja seadmete kahjustuste riski vähendamiseks lugege enne kasutamist läbi kõik juhised ja hoiatused Super Hit[™] massaažipüstoli kasutusjuhendist.

Ettevaatust!

1. Lihasevigastuse korral pidage enne Super Hit[™] massaažipüstoli kasutamist nõu oma arstiga. Alaealistel soovitatakse kasutada Super Hit[™] massaažipüstolit täiskasvanute järelevalve all.
2. Ärge kasutage märjal ja mustal nahal. Seadet saab kasutada ka riiete peal. Hoidke õrnalt ja liigutage seadet ühel kohal umbes 60 sekundit.
3. Ärge kasutage kaelal, luudel ja kehaosadel, kus pole väga lihast. Seadet võib kasutada ainult keha pehmetel kudedel, et vältida valu ja ebamugavusi.
4. Ärge kasutage, kui kehal on verevalumid, valu ja ebamugavustunne.
5. Ärge pange esemeid toote ventilatsiooniavadesse.
6. Ärge kastke toodet vette ja hoidke vett toote ventilatsiooniavadest eemal.
7. Ärge pange toodet tulle või kütteseadme lähedusse.
8. Ärge kasutage Super Hit[™] massaažipüstoli laadimiseks muid laadijaid.

9. Seadet tuleb laadida Fittop Company tarnitud laadijatega.
10. Ärge võtke toodet osadest lahti.
11. Ärge sulgege massaažiotsiku tagakülge sõrmede, juuste ega muude kehaosadega, kuna need võivad sinna kinni jääda



Ärge puudutage seda osa, kui käivitate Super Hit[™] massaažipüstoli ilma massaažiotsikuta.



Ärge puudutage seda osa, kui käivitate Super Hit[™] massaažipüstoli massaažiotsikuga.

Hoiatused ja meeldetuletused


1. Hoidke seade eemal vedelikest või soojusallikatest, hoidke ventilatsiooniavad tolmuvabad.
2. Kui seade on laetud, siis eemaldage laadija.
3. Super Hit[™] massaažipüstolit ei saa kasutada laadimise ajal.
4. Palun kasutage seda seadet vastavalt juhistele.
5. Enne igat kasutuskorda kontrollige, kas toode töötab vastavalt juhendile.

Vastunäidustused:

Super Hit™ massaažipüstolit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel ilma arsti eelneva nõusolekuta:

- Rasedus
- Diabeetilised tüsistused (nt neuropaatia, võrkkesta kahjustused)
- Südamestimulaator
- Hiljutised operatsioonid
- Epilepsia
- Migreen
- Ketta herniatsioon
- Selgroolülide irdumine või seljaaju liigeste jäikus
- Hiljutised liigese asendusoperatsioonid
- Spiraal, metallist nõel või terasplaat
- Muud tervisega seotud probleemid

PS! Need vastunäidustused ei tähenda, et Te ei saaks toodet kasutada. Enne kasutamist soovitame nõu pidada arstiga.

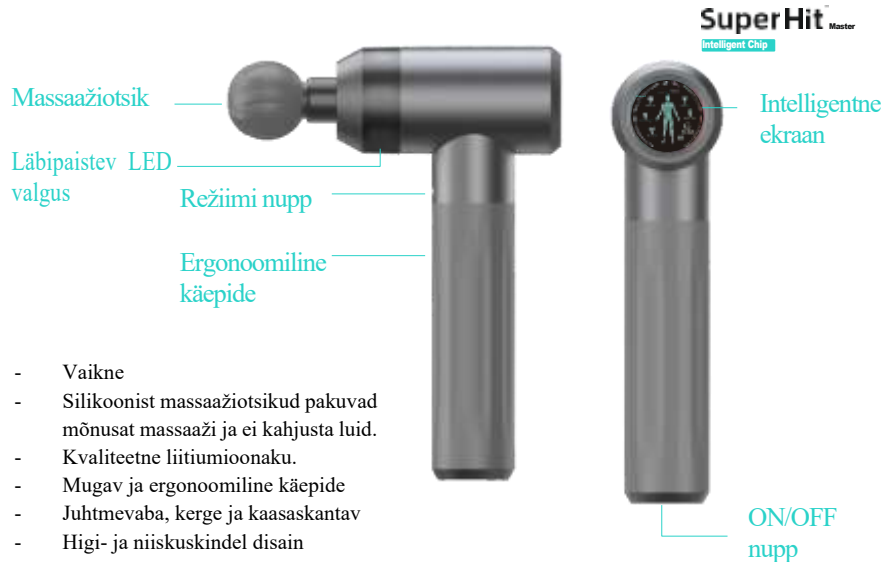

- Vaikne
- Silikoonist massaažiotsikud pakuvad mõnusat massaaži ja ei kahjusta luid.
- Kvaliteetne liitiumioonaku.
- Mugav ja ergonoomiline käepide
- Juhtmevaba, kerge ja kaasaskantav
- Higi- ja niiskuskindel disain

Achilleuse kõõlus-
massaažiotsikNärvipunkti
massaažiotsikÜmmargune
massaažiotsikMassaažiotsik
liigete massaažiksMassaažiotsik
soojenduseks

Massaažiotsikute vahetamine:

Valige massaažiotsik vastavalt soovitud massaažile. Massaažiotsiku eemaldamiseks tõmmake ja keerake otsikut. Otsiku kinnitamiseks lükake ja keerake otsikut. Kindlasti tuleb otsikut keerata, mitte lihtsalt tõmmata või lükata.

Põhiandmed:

Seadme nimi: Intelligentne massaažipüstol	Adaptori spetsifikatsioonid: DC, 29V – 1A
Seadme mudel: FSM931	Nimivool: umbes 1000mA
Mõõdud: 148.5x63x253.5 mm	Tööaeg: Automaatne väljalülitus 15 minuti pärast
Kaal: umbes 0.9 kg	Massaažiotsikud: 5 erinevat
Pinge: 29V	Režiimid: intelligente ja manuaalne

Laadimine

1. Laadige akut enne esimest kasutamist (Kui toode on alles laetud, siis pole see vajalik)
2. Ühendage kaasasolev adapteri üks ots toiteallikaga ning teine käepidame all oleva laadimispesaga.
3. Laadimisprotsessi aku indikaator: akutase <25% (punane tuluke vilgub), akutase <50% (kollane tuluke vilgub), akutase <75% (sinine tuluke vilgub), akutase >75% (roheline tuluke vilgub), akutase 100% (laadimine lõpetatud ja aku täis, siis roheline tuli jääb põlema)
4. Ärge käivitage püstolit laadimise ajal

Juhend

- Vajutage ON/OFF nuppu, massaažirežiimi käivitamiseks vajutage „mode“ nuppu
- Kui soovite intelligentset režiimi vahetada manuaalse peale, hoidke 3 sekundit „mode“ nupul. Siis on võimalik manuaalselt režiimi kiirust reguleerida (hoides „mode“ nuppu all)
- Süsteem lülitub peale 15min kasutamist tagasi intelligentse režiimi peale ja massaažipüstol lülitub automaatselt välja. Kui seade töötab, siis hääluhised töötavad vaikimisi. Kui seade töötab, siis pikk vajutus ON/OFF nupul sulgeb hääluhised peale paari piiksu. Samamoodi saab selle uuesti sisse lülitada. Kui aku on alla 25%, siis mingi aja järel kostub „low battery, please charge in time“ („Madal akutase, palun laadige seadet lähiajal“) (Antud hääluhis töötab isegi, siis kui häälu on välja lülitatud)

1. Intelligente režiim: lühike vajutus "mode" nupul, et seade käivitada, seade töötab automaatselt intelligentsel režiimil. Lähedusandur, luude tuvastamise andur ja massaažiotsiku tuvastamise funktsioon töötavad intelligentses režiimis. Peale käivitamist tuvastab seade automaatselt massaažiotsiku ja valib aeglase kiiruse. Massaažipüstol püsib madalal kiirusel kuni massaažiotsik on objekti lähedal, seejärel valib püstol kasutusel oleva otsiku jaoks mõeldud kiiruse. Kui massaažiotsikut ei tuvastata, siis lülitub seade 5 sekundi jooksul välja.
2. Manuaalne režiim: Pikk vajutus "mode" nupul peale seadme sisse lülitamist käivitab manuaalse režiimi. Lähedusandur, luude tuvastamise andur ja massaažiotsiku tuvastamise andur on välja lülitatud. Saate kiirust muuta manuaalselt. Hoides "mode" nuppu all kiireneb seade kuni nuppu all hoida või kuni on saavutatud maksimaalne kiirus. Välja lülitamiseks vajutage uuesti korra "mode" nupule.

Akutaseme indikaator:

Akutase 75% - 100% (neli rida põleb, indikaator roheline)

Akutase 50% - 75% (3 rida põleb, indikaator sinine)

Akutase 25% - 50% (2 rida põleb, indikaator kollane)

Akutase 5% - 25% (1 rida põleb, indikaator punane)

Akutase <5% (näitab tühja aku sümbolit, indikaatoril vilgub punane tuli)

Hooldamine, puhastamine, hoiustamine, transport

1. Puhastage seade kergelt niiske rätikuga ja kuivatage pehme lapiga
2. Kui seadet ei kasutata või transpordite seadet, siis hoidke seda karbis
3. Säilitage kuivas, hästi ventileeritud kohas ja vähemalt 250mm kõrgusel maapinnast.
4. Kui seadet pole kaua aega kasutatud, siis laadige toodet vähemalt iga 6 kuu tagant
5. Toodet võib transportida nii auto, rongi, laeva kui ka lennukiga.
6. Toode peab olema transpordi ajaks kinnitatud, et vältida vibratsiooni, kokkupõrkeid, veeremist ja kukkumist ning asetada see vihmakindlasse kohta.

1. Intelligente tehnoloogia

Massaažiotsikute vahetamine

Võrreldes teiste massaažipüstolitega on Super Hit™ massaažipüstol on nutikam ja seetõttu lihasvalude leevendamiseks ideaalne

Erinevate massaažiotsikute sisestamisel tuvastab seade selle ja süsteem valib sellele vastava režiimi, kiiruse ja amplituudi.



2. Intelligente tehnoloogia

Hääljuhised

Traditsioonilise vaigse režiimi asemel, pakub Super Hit™ massaažipüstol mugavaid ja kiireid hääljuhiseid.

Erinevaid massaažiotsikuid sisestades, lülitub režiim automaatselt vastavale löökrežiimile ja hääljuhisele.

Näiteks ümmarguse massaažiotsiku sisestamisel lülitub spsteem autommatselt mitme tsooni löögastusrežiimile ja kuulda on järgmine hääljuhise: “ *General mode suitable for all muscle fascia parts.*”

Hääljuhised saate sisse ja välja lülitada, siis kui soovite. Kui seade on sisse lülitatud, hoidke toitenuppu kolm sekundit all. Sisse lülitamisel kuulete ühte piiksu, välja lülitamisel kahte.

“ *General mode suitable for all muscle fascia parts.*”



3. Intelligente tehnoloogia

Visuaalne juhtimisliides

Erineb tavapära massaažipüstolitest, sest on lisatud ainulaadne kasutajasõbralik juhtimisliides, millel on kõik ikoonid selgelt nähtavad.

- Massaažirežiimid (intelligente, manuaalne)
- Massaažiotsikute ikoonid
- Massaažiirkonnad (eri kehaosad)
- Taimer (15 minutit)
- Akutase
- Kiirusenäidik (roheline ja punased kriipsud ringis)



Fittop'i insenerid töötasid välja kasutajasõbraliku liidese, mis aitab palju ja võimaldab algajatel hõlpsasti mõista, kuidas Super Hit[™] massaažipüstol töötab.

4. Intelligente tehnoloogia

Eristab luid ja lihaseid

Traditsiooniliste ebaturvaliste ja tugevate massaažipüstolite asemel tunnetab Super Hit[™] parema kaitse saavutamiseks ära lihased ja luud.

Kui süsteem tunnetab luud, siis vähendab see koheselt kiirust ja võimsust, et maksimeerida luu kaitset juhuslike vigastuste eest.

See funktsioon võimaldab nautida massaaži täiesti turvaliselt.



5. Intelligente tehnoloogia

Energiasäästlik tühikäigul töötav süsteem.

Erinevalt tavapäraest mitesäästvastest massaažipüstolitest on Super Hit™ massaažipüstolil energiasäästmiseks intelligentne tühikäigul töötav tehnoloogia.

Kui massaažipüstol on kehast eemal, siis lülitub see automaatselt tühikäigule.

Nutikas energiasääst pole mitte ainult aku säästmise, vaid ka toote pikema eluea tagamiseks.



Super Hit™ on iga massaažiotsiku disainitud just nii, et need vastavad Teie vajadustele

Ümmargune massaažiotsik

Maksimum RPM: 3500rpm

Unikaalne lainelise struktuuriga disain paremaks fastsia stimulatsiooni saavutamiseks. Sobib erinevatele lihasrühmadele.

Hääljuhis "General mode suitable for all muscle fascia parts."



FITTOP

Massaažiotsik soojenduseks

Maksimum RPM: 3150rpm

Jäljendab kätega masseerimist

Lihaste kiireks soojendamiseks

Hääljuhis “Warm-up mode for quick entering into motion state.”



Massaažiotsik liigestele

Maksimum RPM:2275rpm

Iseloomulik sissepoole nõgus disain, mis tagab massaaži ajal parema liigeste ja sabaluu kaitse.

Hääljuhis “Joint massage mode to relieve pain around knee, elbow joint and lumbar vertebrae after exercise.”

Närvipunktide massaažiotsik

Maksimum RPM:2975rpm

Iseloomulik spiraalse tekstuuriga kujundus sügavamateks löökideks valupunktides.

Hääljuhis “Dedicated Trigger points release mode for whole body trigger points relieving.”



Achilleuse kõõluse massaažiotsik

Maksimum RPM:2625rpm

Spetsiaalne bioonline v-kujuline disain sobib ideaalsetl Achieelluse kõõluse tagakaela ja seljaosa masseerimiseks.

Hääljuhis “Achilles tendon and ankle joint relaxation mode for relaxation before and after intense jumping and running exercise.”

SuperHit
Master
Intelligent Chip

